

Flexibilité optimale pour les pharmaciens et les patients


Le pilulier FlexRxTM avec étiquette amovible offre une flexibilité optimale car il permet de pouvoir faire des ajustements de médicaments à n'importe laquelle des cellules, même celles du centre.

Système de gestion de médicaments FlexRxTM avec étiquette amovible



Caractéristiques et avantages principaux

- Des bornes d'alignement surélevées sur la carte alvéolaire assurent un positionnement précis pour une application d'étiquette lisse et sans effort
- La nouvelle carte alvéolaire Bio-PET médicalement approuvée contient 33 % de PET à base de plantes (disponible avec ou sans crochets)
- Les coins de la carte alvéolaire absorbent l'énergie lorsque le médicament tombe pendant le remplissage, ce qui réduit le risque de « saut » des médicaments
- 28 cavités de grande capacité par carte alvéolaire à utiliser comme emballage de 1 semaine avec 4 passages de médicaments/jour
- Les crochets permettent de suspendre les cartes alvéolaires remplies pour un rangement pratique ou dans un chariot à médicaments
- L'étiquette A4 standard (8,5 x 11,69 po) assure la compatibilité avec les imprimantes laser
- La grille récapitulative fournit des conseils pendant le remplissage et permet une vérification facile du produit rempli
- Conception simple d'étiquettes amovibles, permettant de les décoller d'un coin pour accéder à la cavité et de les refermer
- L'impression sur chaque cellule indique le nom du patient, le médicament inclus et la date/heure à laquelle il doit être pris avec des colonnes de couleurs différentes pour indiquer visuellement le moment de la journée pour prendre le médicament
- Chaque cellule est perforée et peut être détachée pour une portabilité pratique, créant un gobelet à médicaments facile à utiliser avec accès aux médicaments par simple pression et déchirure

Avant une fois assemblé

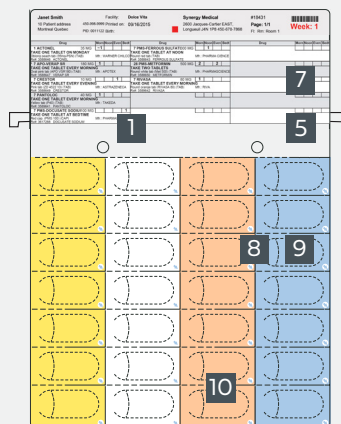

Arrière une fois assemblé

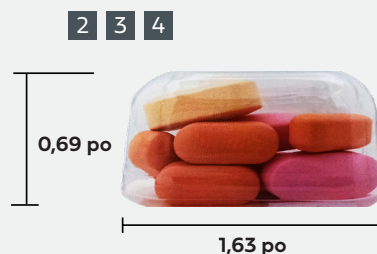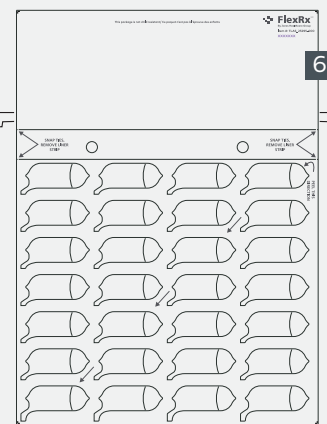

Compatible avec les robots de remplissage

(informez-vous auprès de votre représentant GDK Marketing)



ESSAYEZ AVEC NOTRE TROUSSE DE DÉMARRAGE
TINTROKIT-SFLEXRS

DESCRIPTION

RÉF. MCKESSON

RÉF. JONES#

QTÉ/CAISSE

Étiquettes amovibles FlexRxTM

193494

TLAS_23295-000

500

Cartes alvéolaires FlexRxTM avec crochets – BioPET

193493

TBLIS_23968-00

500

Cartes alvéolaires FlexRxTM sans crochets – BioPET

TBLIS_24346-00

500

Plateau de scellage FlexRxTM

TTRAY_24507-00

1

Rouleau à sceller de 6 po

T12210

1

Trousse de démarrage – FlexRxTM

TINTROKIT-SFLEXRS

1

Système de gestion de médicaments FlexRx™ avec étiquette amovible

Instructions de scellage



1 Placer la carte alvéolaire : Commencez par placer votre carte alvéolaire vide sur le plateau de scellage. Assurez-vous d'un remplissage précis.



2 Préparer l'étiquette : Identifiez l'étiquette imprimée correspondante et retirez la bande de doublure perforée en la pelant par la languette à l'endos.



3 Aligner l'étiquette : Après avoir retiré la bande perforée, alignez l'étiquette à l'aide des bornes d'alignement surélevées comme guides et appuyez fermement sur la carte alvéolaire.

Jaune = déjeuner:
La couleur du
lever de soleil

Blanc = dîner:
La couleur de
l'éclat du jour.

Orange = souper:
La couleur du
coucher de soleil.


Bleu = coucher:
La couleur de la
tombée de la nuit.



4 Appliquer l'étiquette : Pliez l'étiquette pour accéder à la doublure – la doublure doit être décollée dans la direction indiquée par la flèche et lissez l'étiquette pour la fixer à la carte alvéolaire.



5 Assurer une adhérence sécurisée : Utilisez un rouleau pour appliquer une pression uniforme sur l'étiquette dans une direction verticale afin d'assurer un joint d'étanchéité sécurisé.

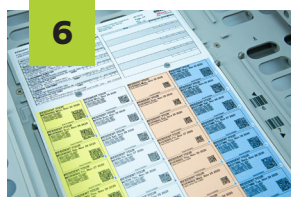

6 Répéter le processus : Répétez le processus pour les cartes alvéolaires restantes sur le plateau, le cas échéant.



7 Vérifier : Retirez doucement FlexRx du plateau. Votre pilulier est maintenant complet et prêt pour vérification avant de le remettre à votre patient.

Comment faire une modification à une cellule sans l'endommager



1. Identifiez le compartiment qui doit être modifié.



2. Décollez l'étiquette du coin inférieur droit pour accéder à la cavité.



3. Faire l'ajustement de médication requis.



4. Refermez le compartiment à médicaments en appuyant fermement sur l'étiquette.