

## Efficacité rationalisée pour les équipes de pharmacie


La nouvelle génération de FlexRx<sup>TM</sup> allie innovation, gain de temps et durabilité. Sa conception en Bio-PET durable est unique en son genre.

### Caractéristiques et avantages principaux



- 1** Des bornes d'alignement surélevées sur la carte alvéolaire assurent un positionnement précis pour une application d'étiquette lisse et sans effort
- 2** La nouvelle carte alvéolaire Bio-PET médicalement approuvée contient 33 % de PET à base de plantes (disponible avec et sans crochets)
- 3** Les coins de la carte alvéolaire absorbent l'énergie lorsque les médicaments tombent pendant le remplissage, diminuant ainsi le risque de « saut » des médicaments
- 4** 28 cavités de grande capacité par carte alvéolaire, à utiliser comme emballage d'une semaine avec 4 passages de médicaments par jour
- 5** Les crochets permettent de suspendre les cartes alvéolaires remplies pour un rangement pratique ou dans un chariot à médicaments
- 6** Une étiquette standard A4 (8,5 x 11,69 po) assure la compatibilité avec les imprimantes laser
- 7** La grille récapitulative fournit des conseils pendant le remplissage et permet une vérification facile du produit rempli
- 8** L'étiquette perforée sur toutes les cavités permet un accès facile aux médicaments
- 9** L'impression sur chaque cellule indique le nom du patient, le médicament inclus et la date/heure à laquelle il doit être pris, avec des colonnes de couleurs différentes pour indiquer visuellement le moment de la journée pour prendre le médicament
- 10** Chaque cellule est perforée et peut être détachée pour une portabilité pratique, créant un gobelet à médicaments facile à utiliser avec accès aux médicaments par simple pression et déchirure

## Système de gestion des médicaments FlexRx<sup>TM</sup> avec étiquette permanente

Avant une fois assemblé

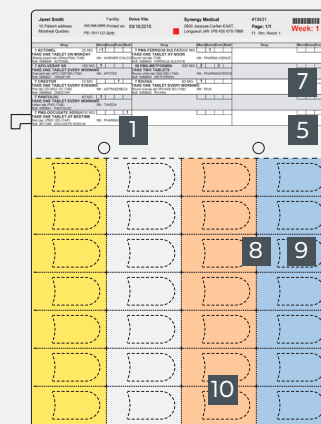

Arrière une fois assemblé

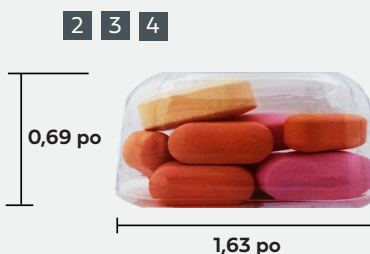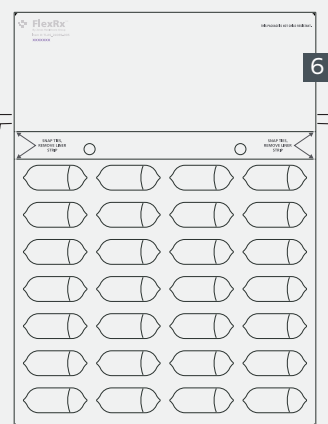

**Compatible avec les robots de remplissage**

(informez-vous auprès de votre représentant GDK Marketing)



**ESSAYEZ AVEC NOTRE TROUSSE DE DÉMARRAGE**

TINTROKIT-FLEXRX2

#### DESCRIPTION

#### MCKESSON#

#### RÉF. JONES#

#### QTÉ/CAISSE

|                                                                |        |                   |     |
|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----|
| Étiquettes permanentes FlexRx <sup>TM</sup>                    | 193495 | TLAS_24069-001    | 500 |
| Cartes alvéolaires FlexRx <sup>TM</sup> avec crochets – BioPET | 193493 | TBLIS_23968-00    | 500 |
| Cartes alvéolaires FlexRx <sup>TM</sup> sans crochets – BioPET |        | TBLIS_24346-00    | 500 |
| Plateau de scellage FlexRx <sup>TM</sup>                       |        | TTRAY_24507-00    | 1   |
| Rouleau à sceller de 6 po                                      |        | T12210            | 1   |
| Trousse de démarrage – FlexRx <sup>TM</sup>                    |        | TINTROKIT-FLEXRX2 | 1   |

## Instructions de Scellage


# Système de gestion des médicaments FlexRx™ avec étiquette permanente



**Placer la carte alvéolaire:** Commencez par placer votre carte alvéolaire vide sur le plateau de scellage. Assurez-vous de la remplir correctement.



**Préparer l'étiquette:** Identifiez l'étiquette imprimée correspondante et retirez la bande de doublure perforée en la pelant par la languette située à l'endos.

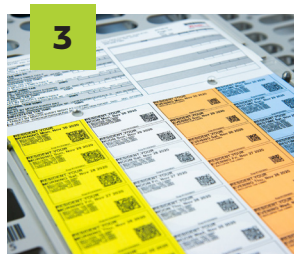

**Aligner l'étiquette:** Après avoir retiré la bande perforée, alignez l'étiquette en utilisant les poteaux d'alignement surélevés comme guides et appuyez fermement dessus pour la fixer sur la carte alvéolaire.

**Jaune** = déjeuner:  
La couleur du lever de soleil

**Blanc** = dîner:  
La couleur de l'éclat du jour.

**Orange** = souper:  
La couleur du coucher de soleil.

**Bleu** = coucher:  
La couleur de la tombée de la nuit.



**Appliquer l'étiquette :** Pliez l'étiquette pour accéder à la doublure, retirez-la, et lissez l'étiquette pour la fixer fermement sur la carte alvéolaire.



**Assurer l'adhérence sécurisée :** Utilisez un rouleau pour appliquer une pression uniforme sur l'étiquette dans une direction verticale afin d'assurer un joint d'étanchéité sécurisé.



**Répéter le processus :** Répétez le processus pour les cartes alvéolaires restantes sur le plateau, le cas échéant.



**Vérifier :** Retirez doucement FlexRx du plateau. Votre pilulier est maintenant complet et prêt pour vérification avant de le remettre à votre patient.

## Accès aux médicaments



**1.** Choisir le compartiment de médicaments approprié pour le dosage et l'heure.



**2.** Posez votre doigt sur le pointillé et poussez à travers l'étiquette.



**3.** Tirez sur l'étiquette pour ouvrir le compartiment.



**4.** Les médicaments sont maintenant accessibles et prêts à être pris.